

Clearblue®

Raskaustesti

Varhainen tulos

- Havaitsee raskauden yli 99 prosentin tarkkuudella kuukautisten oletetusta alkamispäivästä alkaen.
- **Lue tämä esite huolellisesti ennen testin tekemistä.**

1 Koska testin voi tehdä

Suojus Väriä vaihtava näytteenottopää



- Testin voi tehdä jopa 6 päivää ennen kuukautisten väliinjäämistä, mikä on 5 päivää ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää.
- Jos teet testin ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää, käytä aamuvirtsaa. Muutoin voit tehdä testin mihin kellonaikaan tahansa.
- Vältä liiallista juomista ennen testin tekemistä.

2 Tee testi

A



VIRTSASUIHKU

Pidä väriä vaihtava näytteenottopää virtsasuihkussa täydet 5 sekuntia.

- Poista suojakääre ja irrota suojus. **Käytä testipiikko välittömästi.**

Valitse testaustapa

- **TÄRKEÄÄ: Väriä vaihtava näytteenottopää muuttuu välittömästi vaaleanpunaiseksi sen merkiksi, että virtsa imeytyy siihen.**

TAI

B



KERÄTTY NÄYTE

Aloita 20 sekunnin ajanotto heti kun huomaat väriä vaihtavan näytteenottopään muuttuvan vaaleanpunaiseksi.

Kasta vain näytteenottopää kokonaan

- A** Pidä väriä vaihtava näytteenottopää virtsasuihkussa täydet 5 sekuntia.

TAI


- B** Pidä vain näytteenottopäätä täydet 20 sekuntia virtsanäytteessä, joka on kerätty puhtaaseen ja kuivaan astiaan.

- Jos väriä vaihtava näytteenottopää ei ole muuttunut täysin vaaleanpunaiseksi, katso kysymys 7.
- Aseta suojus takaisin paikalleen ja aseta testipiikko tasaiselle alustalle.
- Aloita ajanotto.

3 minuuttia

ODOOTA TÄYDET 3 MINUUTTIA ennen tuloksen lukemista

3 Lue tulos

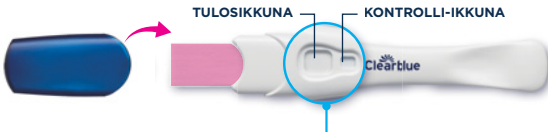

EI RASKAANA



Kuva A

JOS NÄET KAKSI VIIVAA, OLET RASKAANA



Kuva B



Kuva C



Kuva D

SILLÄ EI OLE MERKITYSTÄ, KUINKA VAALEAT TAI TUMMAT VIIVAT OVAT.

- Viiva voi ilmestyä nopeasti kontrolli-ikkunaan, mutta sinun **ON** odotettava 3 minuuttia ennen tuloksen lukemista. Jos kontrolli-ikkunassa ei näy sinistä viivaa, testi ei ole toiminut (katso kysymys 8).

- Jos saat tuloksen **Ei Raskaana**, katso kysymys 4.
- Jos saat tuloksen **Raskaana**, katso kysymys 3.
- Jos olet edelleen epävarma tuloksestasi, katso kysymys 9.

TÄRKEÄÄ! Lue tulos **10 minuutin** sisällä testin tekemisestä. Jätä huomiotta tuloksessa tämän ajan jälkeen tapahtuvat muutokset.

1 Miten Clearblue toimii?

Kun olet raskaana, kehosi tuottaa hCG-raskaushormonia (istukkaagonadotropinia). Tämä testi tunnistaa pienetkin määrät hCG-hormonia virtsassa. (Testin herkkyys on 10 mIU/ml.)

2 Milloin voi tehdä Clearblue Varhainen tulos -raskaustestin?

Voit tehdä testin jopa 6 päivää ennen kuukautisten väliinjäämistä, mikä on 5 päivää ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää. Jos teet testin ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää ja saat tuloksen Ei Raskaana, on kuitenkin mahdollista, että olet raskaana. Alla olevasta taulukosta näet alkuraskauden näytteille tehtyjen laboratoriotestien tulokset.

Varhainen testaaminen

Päivien määrä ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää	Näytteiden prosenttiosuus raskaana olevista naisista, jotka saavat Raskaana-tuloksen
0	>99 %
1	>99 %
2	>99 %
3	>99 %
4	96 %
5	79 %

3 Testin mukaan olen raskaana. Mitä minun pitäisi tehdä?

Ota yhteyttä lääkäriin, joka kertoo seuraavista toimenpiteistä.

4 Testin mukaan en ole raskaana, mutta epäilen silti olevani raskaana. Mitä minun pitäisi tehdä?

Et ehkä ole raskaana, tai hCG-raskaushormonin pitoisuus ei ole vielä riittävän suuri, jotta testi tunnistaisi sen, tai olet ehkä laskenut väärin kuukautisten odotetun alkamispäivän. Jos teet testin varhain, tee se uudelleen kuukautisten oletettuna alkamispäivänä. Jos kuukautisesi ovat myöhässä, tee testi uudelleen kolmen päivän kuluttua. Jos tämänkin testin tulos on Ei Raskaana eivätkä kuukautisesi ole vielä alkaneet, käy lääkärissä.

5 Sain aikaisemmin tuloksen, jonka mukaan olen raskaana, mutta kun tein uuden testin, sainkin Ei Raskaana -tuloksen tai kuukautisesi ovat alkaneet. Mitä tämä tarkoittaa?

Vaikka testi havaitsee raskaushormonin yli 99 prosentin tarkkuudella siitä päivästä lähtien, jolloin kuukautisten pitäisi alkaa, testi voi antaa positiivisen tuloksen, vaikka myöhemmin käykin ilmi, ettei ole raskaana (ts. uusi testituloks on negatiivinen tai kuukautiset alkavat). Tämä voi johtua raskauden luonnollisesta keskeytymisestä raskauden alkuvaiheessa. Tämä on valitettavaa, mutta ei epätavallista, sillä joka neljäs raskaus keskeytyy aivan alkuvaiheessa. Jos saat odottamattoman tuloksen, kysy neuvoa lääkäriiltä.

6 Voiko lääkitys tai terveydentila vaikuttaa tulokseen?

Lue aina käyttämäsi lääkkeiden käyttöohjeet ennen testin tekemistä.

HCG-hormonia sisältävät lääkkeet saattavat vaikuttaa tulokseen. Kohdunulkoiseen raskauteen tai äskettäin raskauteen (vaikka raskaus olisi keskeytynyt ennenaikaisesti) voivat väärinä tuloksia. Jos sinulla on vaihdetuista tai lähestyt väihdevuosi, voit saada virheellisen Raskaana-tuloksen, vaikka et ole raskaana. Klomifeenisitraattia sisältävien hormonihoidojen, särkyväkkeiden, alkoholin, antibioottien ja ehkäisytablettien ei pitäisi vaikuttaa testin tulokseen. Jos saat odottamattomia tuloksia, keskustele niistä lääkärin kanssa.

7 Tein raskaustestin, mutta väri vaihtava näytteenottopää ei muuttunut kokonaan vaaleanpunaiseksi. Mitä minun pitäisi tehdä?

Virtsan määrä on voinut jäädä liian vähäiseksi. Testi on kuitenkin toiminut. Jos kontrolli-ikkunaan ilmestyy sininen viiva 10 minuutin sisällä testin tekemisestä. Jos kontrolli-ikkunaan ei tule sinistä viivaa 10 minuutin kuluessa testin tekemisestä, katso kysymys 8.

8 Tein testin, mutta kontrolli-ikkunaan ei ilmestynyt sinistä viivaa. Mitä minun pitäisi tehdä?

Jos testin tekemisestä on kulunut yli 10 minuuttia, testi ei ole toiminut. Syyinä voi olla:

- Et pitänyt väriä vaihtavaa näytteenottopäätä alaspäin suunnattuna tai asettanut testin vaakatasoon testauksen jälkeen.
- Virtsaa oli liikaa tai liian vähän.

Teet testi uudelleen käyttämällä uutta testipuikkoa ja huolehdi, että noudatat ohjeita. Voit halutessasi kerätä virtsanäytteen ja tehdä testin käyttämällä näytteestä tehtävää testausmenetelmää.

9 Mitä, jos olen epävarma tuloksesta?

Katso Lue tulos -kohdan kuvat.

Kuva A:

Tuloksesi on Ei Raskaana. Jos edelleen epäilet olevasi raskaana, katso kysymys 4.

Kuvat B-D

Tulosikkunan viivan ulkonäkö saattaa vaihdella, mutta tulos on kuitenkin Raskaana huolimatta siitä, kuinka vaalea tai tumma viiva on.

Kuva B: Viiva näyttää tältä todennäköisimmin silloin, kun teet testin ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää, jolloin hCG-pitoisuudet voivat olla suhteellisen alhaisia.

Kuva C: Viiva näyttää yleensä tältä, kun teet testin kuukautisten oletettuna alkamispäivänä tai hiukan sitä ennen tai sen jälkeen.

Kuva D: Viiva näyttää tältä todennäköisimmin silloin, kun teet testin monta päivää kuukautisten oletetun alkamispäivän jälkeen, jolloin hCG-pitoisuudet ovat suuremmat.

Jos olet edelleen epävarma tuloksestasi, odota vähintään 3 päivää ennen kuin testaat uudelleen ja huolehdi, että noudatat ohjeita.

www.clearblue.com

Tuoteneuvoja on paikalla arkipäivisin kello 10-13. Suomenkielinen tuoteneuvoja ei aina ole paikalla ja puheluusi saatetaan vastata englanniksi.

0800 774 150

Lankapuhelut ovat ilmaisia, matkapuheluista saatetaan veloittaa. Kaikki puhelut nauhoitetaan ja valvotaan laadunvalvontatarkoituksessa.

Varaudu ilmoittamaan pakkausten eränumero.

Lisäohjeita sekä raskautta koskevaa tietoa ja yleistä neuvontaa saat osoitteesta: www.clearblue.com

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneve, Sveitsi.
Clearblue on SPD:n tavaramerkki.
© 2019 SPD. Kaikki oikeudet pidätetään.

2300438.03 03-2019

Tarkoitettu itsestestaukseen ja kotikäyttöön.

Vain *in vitro* -diagnostiseen käyttöön.

Vain ulkoiseen käyttöön.

Ei saa käyttää uudelleen.

Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

Säilytä 2-30 °C:n lämpötilassa.

Anna lämmentä huoneenlämpöiseksi 30 minuutin ajan,

jos testiä on säilytetty jääkaapissa.

Älä käytä, jos suojakääre on vaurioitunut.

Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Testin voi hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana.

	Valmistaja		Ei saa käyttää uudelleen.
	Eräkoodi		<i>In vitro</i> -diagnostinen lääketieteellinen laite
	Viimeinen käyttöpäivä		Lämpötilarajat 2-30 °C



0123

