

## Raskaustesti Ultravahainen



**Istetestaukseen. Lue tämä esite huolellisesti ennen testin tekemistä.**

Voit tehdä testin jo  
**6 päivää**  
ennen  
kuukautisten väliinjäämistä.\*

Jos teet testin ennen  
kuukautisten väliinjäämistä,  
käytä aamun  
ensimmäistä virtsaa.  
Muussa tapauksessa voit  
tehdä testin mihin  
aikaan tahansa.

**Vältä runsasta  
juomista**  
ennen testausta.


Lue tulos  
10 minuutin  
kuluessa.

## 1 Tee testi

Poista suojakääre ja suojus ja käytä välittömästi.  
Pidä väriä vaihtavaa näytteenottopäätä:



**tai**

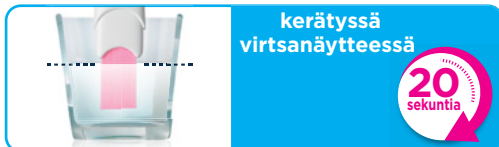

**TÄRKEÄÄ:** Väriä vaihtava näytteenottopää muuttuu välittömästi vaaleanpunaiseksi sen merkiksi, että virtsa imeytyy siihen. **Aloita ajanotto heti, kun näet väriä vaihtavan näytteenottopään muuttuvan vaaleanpunaiseksi.** Aseta suojus takaisin ja aseta testipiikko vaakatasoon. Jos näytteenottopää ei muutu täysin vaaleanpunaiseksi, katso lisätietoja kohdasta Testin virheet.

## 2 Odota



Kontrolli-ikkunan viiva saattaa alkaa tulla näkyviin nopeasti, mutta sinun on **ODOTETTAVA 3 MINUUTTIA** ennen kuin luet tuloksesi.  
Jos näkyviin ei tule sinisiä viivoja, katso lisätietoja kohdasta Testin virheet.

## 3 Tulokset

**Raskaana – jos tuloksesi on Raskaana, ota yhteys lääkäriin.**

Kuva A



Tulosikkuna

Kontrolli-ikkuna

Kuva B



Kuva C



**Ei Raskaana** (ks. kysymys 2).



Jos olet epävarma tuloksestasi, katso kysymys 6.

**JOS NÄET KAKSI VIIVAA, OLET RASKAANA. SILLÄ EI OLE MERKITYSTÄ, KUINKA VAALEAT TAI TUMMAT VIIVAT OVAT.** Kontrolli-ikkunassa on näyttävä sininen viiva, kun luet tuloksen. Viiva osoittaa, että testi on toiminut. Jos viivaa ei näy, katso lisätietoja kohdasta Testin virheet. **TÄRKEÄÄ!** Lue tulos **10 minuutin** sisällä testin tekemisestä. Jätä huomiotta tuloksessa tämän ajan jälkeen tapahtuvat muutokset.

# Kysymyksiä ja vastauksia

## 1 Sain Raskaana-tuloksen. Mitä minun pitäisi tehdä?

Ota yhteyttä lääkäriin, joka kertoo seuraavista toimenpiteistä. Testi voi antaa positiivisen tuloksen, vaikka myöhemmin käykin ilmi, ettei ole raskaana (ks. kysymys 7).

## 2 Sain Ei Raskaana -tuloksen. Mitä tämä tarkoittaa?

Et ehkä ole raskaana tai raskaushormonin pitoisuus ei ole vielä riittävän suuri, jotta testi tunnistaisi sen. Tee testi uudelleen kolmen päivän kuluttua. Jos tämänkin testin tulos on Ei Raskaana eivätkä kuukautisesi ole vielä alkaneet, käy lääkärissä.

## 3 Kuinka aikaisin voin tehdä testin?

Voit tehdä testin 6 päivää ennen kuukautisten väliinjäämistä (5 päivää ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää). Koska hormonitasoissa on kuitenkin eroja naisten välillä ja alkuraskauden aikana ne voivat olla hyvin alhaisia, saatat olla raskaana, mutta silti saada negatiivisen tuloksen. Alla olevasta taulukosta näet alkuraskauden virtsanäytteille tehtyjen laboratoriotestien tulokset:

Päivien määrä ennen kuukautisten väliinjäämistä	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Havaitut raskaudet	>99 %	>99 %	>99 %	>99 %	96 %	79 %

## 4 Miten Clearblue toimii?

Testi tunnistaa hCG-raskaushormonin (istukagonadotropiiniin) virtsasta. Testin herkkyys on 10 mIU/ml. Laboratoriotestien mukaan testin tarkkuus on yli 99 %, kun testi tehdään aikaisintaan kuukautisten oletettuna alkamispäivänä.

## 5 Voiko lääkitys tai terveydentila vaikuttaa tulokseen?

Lue aina käyttämäsi lääkkeen käyttöohjeet ennen testin tekemistä. HCG-hormonia sisältävät lääkkeet ja tietyt harvinaiset sairaudet voivat aiheuttaa virheellisen positiivisen tuloksen. Kohdunulkoinen tai äskettäinen raskaus (vaikka raskaus olisi keskeytynyt ennenaikaisesti) voi vääristää tuloksia. Jos sinulla on vaihdevuodet tai lähestyt vaihdevuosisia, voit saada virheellisen Raskaana-tuloksen, vaikka et ole raskaana. Klomifeenisitraattia sisältävien hormonihoitojen, tavallisten särky-lääkkeiden, alkoholin, antibioottien ja ehkäisy pillereiden **EI** pitäisi vaikuttaa testin

tulokseen. Jos saat odottamattomia tuloksia, keskustele niistä lääkärin kanssa.

## 6 Mitä, jos olen epävarma tuloksesta?

Jos näkyyiin tulee kaksi sinistä 10 minuutin sisällä testin tekemisestä, olet raskaana. Sillä ei ole merkitystä, kuinka vaaleat tai tummat viivat ovat.

### Raskaana-tulokset

**Kuva A** Tulos näyttää todennäköisesti tältä, kun teet testin ennen kuukautisten odotettua alkamispäivää, jolloin hCG-tasot voivat olla suhteellisen alhaiset.

**Kuva B** Tulos voi näyttää tältä, jos teet testin lähellä kuukautisten odotettua alkamispäivää, koska hCG-tasot voivat olla suhteellisen alhaiset.

**Kuva C** Tulos voi näyttää tältä, jos teet testin monta päivää kuukautisten väliinjäämisen jälkeen, jolloin hCG-pitoisuudet ovat suuremmat.

Jos olet edelleen epävarma tuloksestasi, odota vähintään 3 päivää ennen kuin testaat uudelleen ja huolehdi, että noudatat ohjeita.

## 7 Sain aikaisemmin Raskaana-tuloksen, mutta kun tein uuden testin, sainkin negatiivisen tuloksen, tai kuukautisesi ovat alkaneet. Mitä tämä tarkoittaa?

Testi voi antaa positiivisen tuloksen, vaikka myöhemmin käykin ilmi, ettei ole raskaana. Tätä kutsutaan raskauden keskeytymiseksi raskauden alkuvaiheessa. Tämä ei ole epätavallista, sillä noin joka neljäs raskaus keskeytyy alkuvaiheessa. Useimmilla naisilla on tämän jälkeen yhä mahdollisuus terveeseen raskauteen.

## 8 Pitäisikö minun tehdä jotain, jos suunnittelen raskautta?

Kannattaa puhua lääkärin kanssa, ennen kuin yrität tulla raskaaksi. Monet lääkärit suosittelevat foolihappoa tai muita vitamiinilisiä ja kehittävät välttämään alkoholia ja lopettamaan tupakkoinnin. Myös painonhallinnasta voi olla hyötyä. Voit myös harkita ovulaatiotestin käyttämistä tunnistaaaksesi hedelmällisimmät päivät. Clearblue-tuotevalikoiman avulla voit maksimoida mahdollisuutesi tulla raskaaksi.

# ! Testin virheet

## Väri vaihtava näytteenottopää ei muutu täysin vaaleanpunaiseksi.

Virtsan määrä ei ehkä ole ollut riittävä. Testi on kuitenkin toiminut, jos kontrolli-ikkunaan ilmestyy sininen viiva 10 minuutin sisällä testin tekemisestä.

## Kontrolli-ikkunaan ei tule sinistä viivaa 10 minuutin kuluessa testin tekemisestä.

Testi ei ole toiminut, mahdollisesti siksi, että virtsaa on käytetty liikaa tai liian vähän. Tee testi uudelleen käyttämällä uutta testiä ja huolehdi, että noudatat ohjeita.

Tulosikkuna  
Kontrolli-ikkuna



## www.clearblue.com

Tuoteneuvoja on paikalla arkipäivisin kello 10-13. Suomenkielinen tuoteneuvoja ei aina paikalla, ja puheluusi saatetaan vastata englanniksi.


**0800 774 150** Puhelut ovat ilmaisia.

Kaikki puhelut nauhoitetaan, ja niitä valvotaan laadunvalvontatarkoituksessa. Pidä tuote, pakkaus ja myös suojapussi käsillä, kun soitat.

Clearblue Ultravahainen -testin käyttöohjeet, joiden suojakääreeseen on painettu CB14. Tarkoitettu isetesteistukseen ja kotikäyttöön. Vain *in vitro* -diagnostiseen käyttöön. Vain ulkoiseen käyttöön. Ei saa käyttää uudelleen. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Säilytä 2-30 °C:n lämpötilassa. Anna lämmitä huoneenlämpöiseksi 30 minuutin ajan, jos testiä on säilytetty jääkaapissa. Älä käytä, jos suojakääre on vaurioitunut. Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Testin voi hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Älä pura laitetta. Sisältää

pieniä osia. Älä syö mitään tämän laitteen osia. Jos osia on vahingossa nieltynyt, on hakeuduttava lääkäriin hoitoon. Ilmoita Clearbluelle kaikista tämän tuotteen käytöstä aiheutuneista vammoista.

<sup>1</sup>Raskaana-tuloksista 79 % voidaan havaita 6 päivää ennen kuukautisten väliinjäämistä (5 päivää ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää).

 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),  
Route de St. Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneve, Sveitsi.

 LOT	Eräkoodi	 IVD	<i>In vitro</i> -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinällinen laite		Valmistaja
	Viimeinen käyttöpäivä		Lämpötilaraja 2-30 °C		Ei saa käyttää uudelleen

Clearblue on SPD:n tavaramerkki.  
© 2021 SPD. Kaikki oikeudet pidätetään.