


Raskaustesti

Nopea tulos

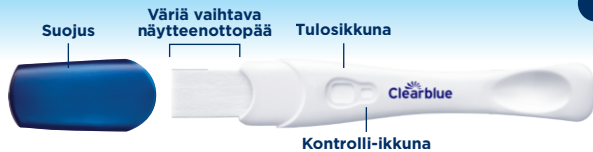

Itsetestaukseen. Lue tämä esite huolellisesti ennen testin tekemistä.

Tämä tuote on ei-automaattinen, kotona suoritettava itsetestauslaite istukagonadotropiinin (hCG) kvalitatiiviseen havaitsemiseen naisen virtsasta raskauden määrittämiseksi.¹ Tarkoitettu käytettäväksi aikaisintaan 4 päivää ennen kuukautisten alkamista.²

Varoitukset ja varotoimet

Ohjeet laitteelle, jonka kääreeseen on painettu "CB11012". Tarkoitettu itsetestaukseen ja kotikäyttöön. Vain *in vitro* -diagnostiseen käyttöön. Vain ulkoiseen käyttöön. Ei saa käyttää uudelleen. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Säilytä 2–30 °C:n lämpötilassa. Anna lämmetä huoneenlämpöiseksi 30 minuutin ajan, jos testiä on säilytetty jääkaapissa. Älä käytä, jos suojakääre on vaurioitunut. Kun kääre on avattu, käytä testi välittömästi. Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Testin voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Sisältää pieniä osia. Älä syö mitään tämän laitteen osia. Jos osia on vahingossa nieltä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Ilmoita Clearblueelle kaikista tämän tuotteen käytöstä aiheutuneista vammoista.

Tarkkuus yli 99 %
kuukautisten oletetusta
alkamispäivästä alkaen

+ tai **-** Helppolukuiset
tulokset

Vältä runsasta
juomista
ennen testausta.

Lue tulokset
10 minuutin
kuluessa.



1 Tee testi

Tarvittavat materiaalit, joita ei ole toimitettu: puhdas, kuiva astia ja sekuntikello. Poista suojakääreestä, poista suojus ja käytä testi välittömästi.

Aseta väriä vaihtava näytteenottopää **5 sekunniksi**:



virtsasuihkun alle

tai



kerättyyn
virtsanäytteeseen

TÄRKEÄÄ: väriä vaihtava näytteenottopää muuttuu välittömästi vaaleanpunaiseksi, mikä osoittaa, että se imee virtsaa, **mutta sinun ON pidettävä kärkeä virtsassa täydet 5 sekuntia.**

Aseta suojus takaisin paikoilleen ja aseta testipuikko vaakatasoon. Jos näytteenottopää ei muutu täysin vaaleanpunaiseksi, katso lisätietoja kohdasta Testivirheet.

TÄRKEÄÄ: upota näytteenottopää kokonaan kuvan osoittamalla tavalla

2 Odota



- Tulos Raskaana + voi näkyä 1 minuutissa, kun testi tehdään kuukautisten väliinjäämisen jälkeen (kuukautisten oletettua alkamispäivää seuraavana päivänä).
- Odota 3 minuuttia, jotta tulos Ei Raskaana - varmistuu.

Jos näkyviin ei tule sinisiä viivoja, katso lisätietoja kohdasta Testivirheet.

3 Tulokset

Raskaana - jos tuloksesi on Raskaana, ota yhteys äitiysneuvolaan
(katso kysymys 1).

Kuva A



Tulosikkuna

Kuva B



Kuva C



Ei Raskaana
(katso kysymys 2).



Jos olet epävarma tuloksestasi, katso kysymys 6.

Kontrolli-ikkunassa on näytävä sininen viiva, kun luet tuloksen. Viiva osoittaa, että testi on toiminut. Jos viivaa ei näy, katso lisätietoja kohdasta Testivirheet.

TÄRKEÄÄ! Lue tulos **10 minuutin sisällä** testin tekemisestä. Jätä huomiotta tuloksessa tämän ajan jälkeen tapahtuvat muutokset.

Kysymyksiä ja vastauksia

1 Sain Raskaana-tuloksen. Mitä minun pitäisi tehdä?

Ota yhteys äitiysneuvolaan, joka neuvoo sinua seuraavissa vaiheissa. Testi voi antaa positiivisen tuloksen, vaikka myöhemmin kävisikin ilmi, ettet ole enää raskaana (katso kysymys 7).

2 Sain Ei Raskaana -tuloksen. Mitä tämä tarkoittaa?

Et ehkä ole raskaana tai raskaushormonin pitoisuus ei ehkä ole vielä riittävän suuri, jotta testi tunnistaisi sen. Tee testi uudelleen kolmen päivän kuluttua. Jos tämänkin testin tulos on Ei Raskaana eivätkä kuukautisesi ole vielä alkaneet, ota yhteys äitiysneuvolaan.

3 En ole varma, milloin seuraavien kuukautisten on määrä alkaa. Mistä tiedän, suoritanko testin oikeaan aikaan?

Saat selvittää kuukautisten oletetun alkamispäivän, kun määrität kuukautiskierron tavallisen pituuden laskemalla päivät kuukautisten alkamispäivästä seuraavien kuukautisten alkamista edeltävään päivään. Jos kuukautiskierron epäsäännöllinen, tee testi viimeksi kuluneiden kuukausien pisimmän kierron mukaan.

4 Miten Clearblue toimii?

Se havaitsee hCG:n virtsassa näytteen ottamisen jälkeen. Visuaaliset tulokset osoittavat, onko hCG:tä havaittu yli 99 %:n tarkkuudella kuukautisten oletetusta alkamispäivästä alkaen.

5 Voiko lääkitys tai terveydentila vaikuttaa tulokseen?

Lue aina käyttämäsi lääkkeen käyttöohjeet ennen testin tekemistä. hCG-hormonia sisältävät lääkkeet ja tietyt harvinaiset sairaudet voivat aiheuttaa virheellisen positiivisen tuloksen. Kohdunulkoinen tai äskettäinen raskaus (vaikka raskaus olisi keskeytynyt ennenaikaisesti) voi vääristää tuloksia. Jos sinulla on vaihdevuodet tai lähestyt vaihdevuosia, voit saada virheellisen Raskaana-tuloksen, vaikka et ole raskaana. Klomifeenisitraattia sisältävien hormonihoitojen, tavallisten särkylääkkeiden, alkoholin, antibioottien ja ehkäisy pillereiden EI pitäisi vaikuttaa testin tulokseen. Jos saat odottamattomia tuloksia, keskustele niistä lääkärin kanssa.

6 Entä, jos olen epävarma tuloksesta?

Raskaana-tulos edellyttää, että 10 minuutin sisällä testin tekemisestä kontrolli-ikkunaan tulee näkyviin sininen viiva ja tulosikkunaan plusmerkki (+).

Raskaana-tulokset

Kuva A: Merkki näyttää tältä todennäköisimmin silloin, kun olet raskaana ja teet testin monta päivää kuukautisten oletetun alkamispäivän jälkeen, jolloin hCG-pitoisuudet ovat suuremmat.

Kuva B: Tulos voi näyttää tältä, jos teet testin lähellä kuukautisten oletettua alkamispäivää, koska hCG-pitoisuudet voivat olla suhteellisen alhaiset.

Kuva C: Tämä tarkoittaa edelleen raskaana olevaa tuloa.

Jos toinen plus-merkin (+) muodostavista viivoista on vaaleampi tai tummempi kuin toinen, sillä ei ole merkitystä, vaan tuloksesi on Raskaana.

Ei Raskaana -tulos edellyttää, että 10 minuutin sisällä testin tekemisestä kontrolli-ikkunaan tulee näkyviin sininen viiva ja tulosikkunaan miinusmerkki (-). Jos olet edelleen epävarma tuloksestasi, odota vähintään 3 päivää ennen kuin testaat uudelleen ja varmista, että noudatat ohjeita.

7 Sain aikaisemmin Raskaana-tuloksen, mutta kun tein uuden testin, sainkin negatiivisen tuloksen, tai kuukautisesi ovat alkaneet. Mitä tämä tarkoittaa?

Testi voi antaa positiivisen tuloksen, vaikka myöhemmin kävisikin ilmi, ettet ole raskaana. Tätä kutsutaan raskauden keskeytymiseksi spontaaneiksi alkuvaiheissa. Tämä ei ole epätavallista, sillä noin joka neljäs raskaus keskeytyy alkuvaiheissa. Useimmat naiset voivat tämän jälkeen kokea normaalin raskauden.

8 Onko mitään, mitä minun pitäisi tehdä, jos suunnittelen raskautta?

On hyvä keskustella lääkärin kanssa ennen kuin yrität tulla raskaaksi. Monet lääkärit suosittelevat fooliappoa tai muita vitamiinilisä ja kehottavat välttämään alkoholia ja lopettamaan tupakoinnin. Myös painonhallinnasta voi olla hyötyä. Voit myös harkita ovulaatiotestin käyttämistä tunnistaaaksesi hedelmällisimmät päivät. Clearblue-tuotevalikoiman avulla voit maksimoida mahdollisuutesi tulla raskaaksi.

! Testivirheet

Väri vaihtava näytteenottopää ei ole muuttunut täysin vaaleanpunaiseksi. Virtsan määrä ei ehkä ole ollut riittävä. Ota kuitenkin toiminut, jos kontrolliviiva on ilmestynyt 10 minuutin sisällä testin tekemisestä.

Kontrolli-ikkunaan ei tule sinistä viivaa 10 minuutin kuluessa testin tekemisestä. Testi ei ole toiminut, mahdollisesti siksi, että virtsaa on käytetty liikaa tai liian vähän. Tee testi uudelleen käyttämällä uutta testiä ja huolehdi, että noudatat ohjeita.

Tulosikkuna Kontrolli-ikkuna



www.clearblue.com

Tuoteneuvoja on paikalla arkipäivisin kello 10-13. Suomenkielinen tuoteneuvoja ei aina ole paikalla, ja puheluisi saatetaan vastata englanniksi.

0800 774 150 Puhelut ovat ilmaisia.

Kaikki puhelut nauhoitetaan, ja niitä valvotaan laadunvalvontatarkoituksessa. Pidä tuote, pakkaus ja myös suojaussi käsillä, kun soitat.

Suorituskykyominaisuudet

Kliininen suorituskyky:

Kliinisen suorituskyvyn testaus osoitti, että laite on > 99 % tarkka raskaustilanteen määrittämisessä kuukautisten oletetusta alkamispäivästä alkaen.

- Laite oli > 99 % tarkka maallikkokäyttäjien käsissä verrattuna heidän raskaustilanteeseensa (testattu 120 naisella).
- Tutkimuksessa, jossa testattiin 600 näytettä, laite oli > 99 % tarkka kuukautisten oletetusta alkamispäivästä alkaen.
- Kliinisen spesifisyyden testaus peri- ja postmenopausaalisilla näytteillä (600 näytettä) vahvisti > 99 %:n spesifisyyden.

Analyttinen suorituskyky:

Analyttinen spesifisyys osoitettiin testaamalla laite mahdollisesti häiritseville tai ristireagoivilla aineilla.

Tulokset vahvistivat, että niiden korkeat pitoisuudet eivät vaikuta laitteen suorituskykyyn. Siihen eivät vaikuta myöskään korkeat beetatymen hCG-fragmentin tasot, erittäin korkeat ehjän hCG:n pitoisuudet, erilaiset ominaispainot tai virtsan pH. Tarkkuustutkimus osoitti, että laitteen analyttinen herkkyys on 25 mIU/ml.

IVD	In vitro -diagnoosiikkaan tarkoitettu lääkinällinen laite	LOT	Eräkoodi
	Valmistaja		Viimeinen käyttöpäivä
	Ei saa käyttää uudelleen		Lämpötilarajat 2-30 °C
EC REP	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä		

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneve, Sveitsi.

Kirjallisuus

- ¹Perrier d'Auterive S, et al. Gynecol Obstet Invest 2007; 64(3): 156-60.
²Gnoth C and Johnson S. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74(7):661-669.

Clearblue on SPD:n tavaramerkki.

© 2023 SPD. Kaikki oikeudet pidätetään.

