


Ultravanhainen
ADVANCED
Raskaustesti

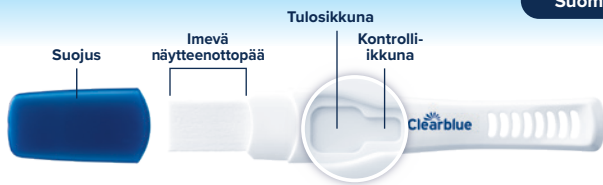

Itsetestaukseen. Lue tämä esite huolellisesti ennen testin tekemistä.

Tämä tuote on ei-automaattinen kotona käytettävä itsetestauslaite istukkagonadotropiinin (hCG) kvalitatiiviseen havaitsemiseen naisen virtsasta raskauden määrittämiseksi. Tarkoitettu käytettäväksi jopa 6 päivää ennen kuukautisten väliinjäämistä (5 päivää ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää).

Varoitukset ja varoimet

Ohjeet laitteelle, jonka kääreeseen on painettu "CB16002". Tarkoitettu itsetestaukseen ja kotikäyttöön. Vain in vitro -diagnostiseen käyttöön. Vain ulkoiseen käyttöön. Ei saa käyttää uudelleen. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Säilytä 2–30 °C:n lämpötilassa. Anna lämmetä huoneenlämpöiseksi 30 minuutin ajan, jos testiä on säilytetty jääkaapissa. Älä käytä, jos suojakääre on vaurioitunut. Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Kun kääre on avattu, käytä testiä välittömästi. Testin voi hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Sisältää pieniä osia. Älä syö mitään tämän laitteen osia. Jos osia on vahingossa nieltävä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Ilmoita kaikista tämän tuotteen käytöstä aiheutuneista vammoista Clearblue-yhtiölle ja jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.



Voit tehdä testin jo

6 päivää

ennen kuukautisten väliinjäämistä*



DualSense-
teknologialla



Vältä runsasta
juomista
ennen testausta



Jos teet testin ennen kuukautisten väliinjäämistä, käytä aamun ensimmäistä virtsaa. Muussa tapauksessa voit tehdä testin mihin aikaan tahansa. Katso lisätietoja kysymyksestä 2

1 Tee testi


Tarvittavat materiaalit, joita ei ole toimitettu: Puhdas, kuiva astia ja sekuntikello. Poista suojakääre ja suojus ja käytä välittömästi. Pidä imevä näytteenottopää alaspäin ja aseta vain kärki **joko**

virtsasuihkuun



tai

kerättyyn virtsanäytteeseen

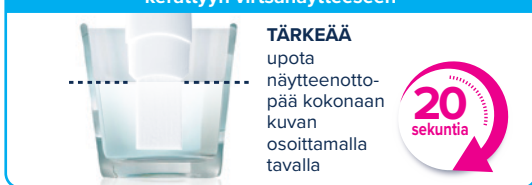

Aseta suojus takaisin ja aseta testipuikko vaakatasoon.

2 Odota



Punaiset viivat alkavat näkyvät. Jos viivaa ei näy, katso lisätietoja kohdasta Testivirheet. **Odota 5 MINUUTTIA** ennen kuin luet tuloksen.

3 Tulokset

Raskaana

Katso lisätietoja kysymyksestä 4.




Jos näet kaksi viivaa, olet raskaana. Sillä ei ole merkitystä, kuinka vaaleat tai tummat viivat ovat.

Kontrolli-ikkunassa on näytävä punainen viiva, kun luet tuloksen. Viiva osoittaa, että testi on toiminut. Jos viivaa ei näy, katso lisätietoja kohdasta Testivirheet. **TÄRKEÄÄ!** Lue tulos 10 minuutin sisällä testin tekemisestä. Jätä huomiotta tuloksessa tämän ajan jälkeen tapahtuvat muutokset.

Ei raskaana

Katso lisätietoja kysymyksestä 5.

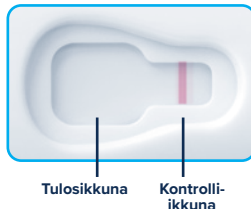

Kysymyksiä ja vastauksia

1 Kuinka tarkka Clearblue on?

Laboratoriotiestien mukaan Ultravirhainen ADVANCED -raskaustestin tarkkuus on yli 99 %, kun testi tehdään aikaisintaan kuukautisten oletettuna alkamispäivänä.

2 Mihin aikaan päivästä voin tehdä testin?

Jos testaat ennen kuukautisten odotettua alkamista, käytä aina päivän ensimmäistä virtsaa, koska raskaushormonipitoisuus on silloin korkeimmallaan. Jos testaat sinä päivänä, jolloin odotat kuukautisten alkavan, hormonitasot ovat korkeammat, jos olet raskaana, joten voit testata virtsalla, joka on kerätty mihin aikaan päivästä tahansa.

3 Kuinka aikaisin voin tehdä testin?

Voit tehdä testin 6 päivää ennen kuukautisten väliinjäämistä (5 päivää ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää).* Hormonitasoissa on kuitenkin yksilöllisiä eroja, ja alkuraskauden aikana pitoisuudet voivat olla hyvin alhaisia, joten saatat silti olla raskaana, vaikka tulos olisikin negatiivinen. Oheinen kaavio kertoo, miten suuri osuus (prosentteina) raskauksista havaitaan laboratoriotesteillä raskauden alkuvaiheessa otetuista virtsanäytteistä:

| Päivien määrä ennen kuukautisten väliinjäämistä | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
|---|--------|--------|--------|------|------|------|
| Havaitut raskaudet | > 99 % | > 99 % | > 99 % | 98 % | 93 % | 77 % |

4 Tulokseni on Raskaana. Mitä minun pitäisi tehdä?

Ota yhteys lääkäriin, joka neuvoo sinua seuraavissa vaiheissa. Testi voi antaa positiivisen tuloksen, vaikka myöhemmin kävisikin ilmi, ettet ole enää raskaana.

5 Tulokseni on Ei raskaana. Mitä tämä tarkoittaa?

Et ehkä ole raskaana tai raskaushormonin pitoisuus ei ehkä ole vielä riittävästi korkea, jotta testi tunnistaisi sen.

Jos teit testin varhain, tee se uudelleen kuukautisten oletettuna alkamispäivänä.

Jos saat tuloksen "Ei raskaana" sinä päivänä tai sen jälkeen, jolloin odotat kuukautistesi alkavan, mutta epäilet silti olevasi raskaana, ota yhteys lääkäriin.

6 Miten DualSense-teknologia toimii?

Vaikka hCG tunnetaan "raskaushormonina", sitä voi hyvin harvoin tapaauksissa esiintyä pieninä pitoisuuksina naisten virtsassa ilman, että he ovat raskaana (yleensä naisten, jotka lähestyvät vaihdevuotia tai joilla on vaihdevuodet). Tämä voi tarkoittaa sitä, että saattaa olla olemassa hyvin pieni riski, että nämä naiset saavat väärän positiivisen tuloksen, jos he käyttävät erittäin herkkää raskaustestiä, eli testiä, jota voidaan käyttää hyvin varhaisessa vaiheessa, koska sen on käytettävä havaitsemaan korkeat hCG-pitoisuudet.

Tutkimusten mukaan näillä naisilla saattaa kuitenkin olla myös korkea FSH-arvo (follikkelia stimuloiva hormoni). Clearbluen DualSense-teknologia on ainutlaatuinen järjestelmä, joka havaitsee hCG:n, kun virtsassa on korkeita FSH-pitoisuuksia, ja se on suunniteltu auttamaan välttämään väärin positiivisten tulosten mahdollisuutta tässä naisryhmässä.

7 Voiko lääkitys tai terveydentila vaikuttaa tulokseen?

Lue aina käyttämäsi lääkkeen käyttöohjeet ennen testin tekemistä. Jos saat odottamattomia tuloksia, keskustele niistä lääkärin kanssa.

HCG:tä tai FSH:tä sisältäviä lääkkeitä ja muut hormonihoidot voivat vaikuttaa tulokseen. Kohdunulkoinen tai äskettäinen raskaus (vaikka raskaus olisi keskeytynyt ennenaikaisesti) voi vääristää tuloksia.

Klomiifeenisitraattia sisältävien hormonihoidojen, tavallisten särkyväkäskeiden, alkoholin, antibioottien ja ehkäisytablettien ei pitäisi vaikuttaa testin tulokseen.

8 Onko mitään, mitä minun pitäisi tehdä, jos suunnittelen raskaata?


On hyvä keskustella lääkärisi kanssa ennen kuin yrität tulla raskaaksi. Monet lääkärit suosittelevat fooliuhappoa tai muita vitamiiniliisiä ja kehittävät välttämään alkoholia ja lopettamaan tupakoinnin. Myös painonhallinnasta voi olla hyötyä. Voit myös harkita ovulaatiotestin käyttämistä tunnistaksesi hedelmällisimmät päivät.

Clearblue-tuotevalikoiman avulla voit maksimoida mahdollisuutesi tulla raskaaksi.

! Testivirheet

Kontrolli-ikkuna ei tule punaista viivaa 10 minuutin kuluessa testin tekemisestä.

Testi ei ole toiminut, mahdollisesti siksi, että virtsaa on käytetty liian tai liian vähän. Tee testi uudelleen käyttämällä uutta testiä ja huolehdi, että noudatat ohjeita.

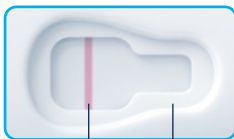

Tulosikkuna Kontrolli-ikkuna



Suorituskykyominaisuudet

Kliininen suorituskyky:

Kliinisen suorituskyvyn testaus osoitti, että laite on > 99 % tarkka raskaustilanteen määrittämisessä kuukautisten oletettuna alkamispäivästä alkaen.

- Laite oli > 99 % tarkka maallikkokäyttäjien käsissä verrattuna heidän raskaustilanteeseensa (testattu 302 naisella).
- Laboratoriotestauksessa, jossa testattiin 708 näytettä, laite oli > 99 % tarkka kuukautisten oletettuna alkamispäivästä alkaen.
- Kliinisen spesifisyyden testaus pre-, peri- ja postmenopausaalisisilla näytteillä (501 näytettä) vahvisti > 99 %:n spesifisyyden.

Analyttinen suorituskyky:

Analyttinen spesifisyys osoitettiin testaamalla laite mahdollisesti häiritseville tai ristireagoivilla aineilla. Tulokset vahvistivat, että niiden korkeat pitoisuudet eivät vaikuta laitteen suorituskykyyn. Siihen eivät vaikuta myöskaan korkeat beetaytimen hCG-fragmentin taso, erittäin korkeat ehjän hCG:n pitoisuudet, erilaiset ominaispainot tai virtsan pH. Tarkkuustutkimus osoitti, että laitteen analyttinen herkkyyks on 10 mIU/ml.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneve, Sveitsi.

Clearblue on SPD:n tavaramerkki.

© 2025 SPD. Kaikki oikeudet pidätetään.

www.clearblue.com

Tuoteneuvoja on paikalla arkipäivisin kello 10-13. Suomenkielinen tuoteneuvoja ei aina ole paikalla, ja puheluisaistetaan vastata englanniksi.

0800 774 150 Puhelut ovat ilmaisia.

Kaikki puhelut nauhoitetaan, ja niitä valvotaan laadunvalvontatarkoituksessa. Pidä tuote, pakkaus ja myös suojaussi käsillä, kun soitat.

| | | | |
|--------|--|-----|------------------------------|
| IVD | In vitro -diagnostinen lääketieteellinen laite | LOT | Eräkoodi |
| | Valmistaja | | Viimeinen käyttöpäivä |
| | Ei saa käyttää uudelleen | | Lämpötilarajat 2°C – 30°C |
| EU REP | Valtuutettu edustaja Euroopan unionissa | | |

Kirjallisuus

1. Perrier d'Hauterive S, et al. Gynecol Obstet Invest 2007; 64(3): 156–60.
2. Gnath C and Johnson S. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74(7):661-669.
3. Gronowski A, et al. Clin Chem 2008; 54: 652-656

*Raskaana-tuloksista 77 % voidaan havaita 6 päivää ennen kuukautisten väliinjäämistä (5 päivää ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää).