Clearblue

Ultravarhainen Raskaustesti

SUOMI



Itsetestaukseen. Lue tämä esite huolellisesti ennen testin tekemistä.

Tämä tuote on ei-automaattinen kotitestilaite istukkagonadotropiinin (hCG) kvalitatiiviseen havaitsemiseen naisen virtsasta raskauden määrittämiseksi. Tarkoitettu käytettäväksi jopa 6 päivää ennen kuukautisten väliinjäämistä (5 päivää ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää).

Varoitukset ja varotoimet

Ohjeet laitteelle, jonka kääreeseen on painettu "CB14005". Tarkoitettu itsetestaukseen ja kotikäyttöön. Vain in vitro -diagnostiseen käyttöön. Vain ulkoiseen käyttöön. Ei saa käyttää uudelleen. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Säilytä 2–30 °C:n lämpötilassa. Anna lämmetä huoneenlämpöiseksi 30 minuutin ajan, jos testiä on säilytetty jääkaapissa. Älä käytä, jos suojakääre on vaurioitunut. Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Kun kääre on avattu, käytä testi välittömästi. Testin voi hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Sisältää pieniä osia. Älä syö mitään tämän laitteen osia. Jos osia on vahingossa nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Ilmoita kaikista tämän tuotteen käytöstä aiheutuneista vammoista Clearblue-yhtiölle ja jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Voit tehdä testin jo 6 päivää ennen kuukautisten väliinjäämistä*

Jos teet testin ennen kuukautisten väliinjäämistä, käytä aamun ensimmäistä virtsaa. Muussa tapauksessa voit tehdä testin mihin aikaan tahansa.

Vältä runsasta juomista ennen testausta

Lue tulokset 10 minuutin kuluessa (10 minuuttia)

1 Tee testi

Tarvittavat materiaalit, joita ei ole toimitettu: Puhdas, kuiva astia ja sekuntikello. Poista suojakääre ja suojus ja käytä välittömästi.



tai



TÄRKEÄÄ: upota näytteenottopää kokonaan kuvan osoittamalla tavalla

Pidä väriä vaihtavaa näytteenottopäätä:

TÄRKEÄÄ: Väriä vaihtava näytteenottopää muuttuu välittömästi vaaleanpunaiseksi sen merkiksi, että virtsa imeytyy siihen. Aloita ajanotto heti, kun näet väriä vaihtavan näytteenottopään muuttuvan vaaleanpunaiseksi. Aseta suojus takaisin ja aseta testipuikko vaakatasoon. Jos näytteenottopää ei muutu täysin vaaleanpunaiseksi, katso lisätietoja kohdasta Testivirheet.

2 Odota



Kontrolli-ikkunan viiva saattaa alkaa tulla näkyviin nopeasti, mutta sinun on **ODOTETTAVA 3 MINUUTTIA** ennen kuin luet tuloksesi.

Jos näkyviin ei tule sinisiä viivoja, katso lisätietoja kohdasta Testivirheet.

3 Tulokset

Raskaana – jos tuloksesi on Raskaana, ota yhteys lääkäriin
(katso kysymys 1)



Ei Raskaana
(katso kysymys 2)



Jos olet epävarma tuloksestasi, katso kysymys 6.

JOS NÄET KAKSI VIIVAA, OLET RASKAANA. SILLÄ EI OLE MERKITYSTÄ, KUINKA VAALEAT TAI TUMMAT VIIVAT OVAT.

Kontrolli-ikkunassa on näyttävä sininen viiva, kun luet tuloksen. Viiva osoittaa, että testi on toiminut. Jos viivaa ei näy, katso lisätietoja kohdasta Testivirheet. **TÄRKEÄÄ!** Lue tulos **10 minuutin** kuluessa testin tekemisestä. Jätä huomiotta tuloksessa tämän ajan jälkeen tapahtuvat muutokset.

? Kysymyksiä ja vastauksia

1. **Sain Raskaana-tuloksen. Mitä minun pitäisi tehdä?** Ota yhteys lääkäriisi, joka neuvoo sinua seuraavissa vaiheissa. Testi voi antaa positiivisen tuloksen, vaikka myöhemmin kävisikin ilmi, ettet ole enää raskaana (katso kysymys 7).
2. **Sain Ei Raskaana -tuloksen. Mitä tämä tarkoittaa?** Et ehkä ole raskaana tai raskaushormonin pitoisuus ei ole vielä riittävän suuri, jotta testi tunnistaisi sen. Tee testi uudelleen kolmen päivän kuluttua. Jos tämänkin testin tulos on Ei Raskaana eivätkä kuukautisesi ole vielä alkaneet, käy lääkärissä.
3. **Kuinka aikaisin voin tehdä testin?** Voit tehdä testin 6 päivää ennen kuukautisten väliinjäämistä (5 päivää ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää).* Saatat kuitenkin olla raskaana, vaikka saisit negatiivisen tuloksen, sillä hormonitasot vaihtelevat naisten välillä ja voivat olla hyvin alhaiset alkuraskauden aikana. Alla olevasta taulukosta näet alkuraskauden virtsanäytteille tehtyjen laboratoriotestien tulokset:

Päivien määrä ennen kuukautisten väliinjäämistä	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Havaitut raskaudet	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %	96 %	79 %

4. **Kuinka testi toimii?** Se havaitsee hCG:n virtsassa näytteen ottamisen jälkeen. Visuaaliset tulokset osoittavat, onko hCG:tä havaittu yli 99 %:n tarkkuudella kuukautisten oletetusta alkamispäivästä alkaen.
5. **Voiko lääkitys tai terveydentila vaikuttaa tulokseen?** Lue aina käyttämäsi lääkkeen käyttöohjeet ennen testin tekemistä. hCG-hormonia sisältävät lääkkeet ja tietyt harvinaiset sairaudet voivat aiheuttaa virheellisen positiivisen tuloksen. Kohdunulkoinen tai äskettäinen raskaus (vaikka raskaus olisi keskeytynyt ennenaikaisesti) voi vääristää tuloksia. Jos sinulla on vaihdevuodet tai lähestyt vaihdevuosia, voit saada virheellisen Raskaana-tuloksen, vaikka et ole raskaana. Klomifeenisitraattia sisältävien hormonihoitojen, tavallisten särkylääkkeiden, alkoholin, antibioottien ja ehkäisypillereiden **EI** pitäisi vaikuttaa testin tulokseen. Jos saat odottamattomia tuloksia, keskustele niistä lääkärin kanssa.
6. **Entä, jos olen epävarma tuloksesta?** Jos näet kaksi sinistä viivaa 10 minuutin kuluessa testistä, olet raskaana, sillä ei ole väliä, kuinka himmeät tai tummat viivat ovat.

   Raskaana-tulokset

   Kuva A: Tämä tapahtuu todennäköisemmin, kun testaat ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää, jolloin hCG-pitoisuudet voivat olla suhteellisen alhaiset.

   Kuva B: Tulos voi näyttää tältä, jos teet testin lähellä kuukautisten oletettua alkamispäivää, koska hCG-pitoisuudet voivat olla suhteellisen alhaiset.


   Kuva C: Tulos voi näyttää tältä, jos teet testin monta päivää kuukautisten väliinjäämisen jälkeen, jolloin hCG-pitoisuudet ovat suuremmat.

   Jos olet edelleen epävarma tuloksestasi, odota vähintään 3 päivää ennen kuin testaat uudelleen ja varmista, että noudatat ohjeita.
7. **Sain aikaisemmin Raskaana-tuloksen, mutta kun tein uuden testin, sainkin negatiivisen tuloksen, tai kuukautiseni ovat alkaneet. Mitä tämä tarkoittaa?** Testi voi antaa positiivisen tuloksen, vaikka myöhemmin kävisikin ilmi, ettet ole enää raskaana. Tätä kutsutaan raskauden keskeytymiseksi raskauden alkuvaiheessa. Tämä ei ole epätavallista, sillä noin joka neljäs raskaus keskeytyy alkuvaiheessa. Useimmat naiset voivat tämän jälkeen kokea normaalin raskauden.
8. **Onko mitään, mitä minun pitäisi tehdä, jos suunnittelen raskautta?** On hyvä keskustella lääkärisi kanssa ennen kuin yrität tulla raskaaksi. Monet lääkärit suosittelevat foolihappoa tai muita vitamiinilisiä ja kehottavat välttämään alkoholia ja lopettamaan tupakoinnin. Myös painonhallinnasta voi olla hyötyä. Voit myös harkita ovulaatiotestin käyttämistä tunnistaaksesi hedelmällisimmät päiväsi. Clearblue-tuotevalikoiman avulla voit maksimoida mahdollisuutesi tulla raskaaksi.

! Testivirheet

Väriä vaihtava näytteenottopää ei muutu täysin vaaleanpunaiseksi. Virtsan määrä ei ehkä ole ollut riittävä. Testi on kuitenkin toiminut, jos kontrolliviiva on ilmestynyt 10 minuutin sisällä testin tekemisestä.

Kontrolli-ikkunaan ei tule sinistä viivaa 10 minuutin kuluessa testin tekemisestä. Testi ei ole toiminut, mahdollisesti siksi, että virtsaa on käytetty liikaa tai liian vähän. Tee testi uudelleen käyttämällä uutta testiä ja huolehdi, että noudatat ohjeita.

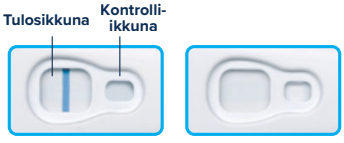

www.clearblue.com
Tuoteneuvoja on paikalla arkipäivisin kello 10-13. Suomenkielinen tuoteneuvoja ei aina ole paikalla, ja puheluusi saatetaan vastata englanniksi.
0800 774 150 Puhelut ovat ilmaisia.
Kaikki puhelut nauhoitetaan, ja niitä valvotaan laadunvalvontatarkoituksessa.
Pidä tuote, pakkaus ja myös suojapussi käsillä, kun soitat.

Suorituskykyominaisuudet

Kliininen suorituskyky:

Kliinisen suorituskyvyn testaus osoitti, että laite on > 99 % tarkka raskaustilanteen määrittämisessä kuukautisten oletetusta alkamispäivästä alkaen.

- Laite oli > 99 % tarkka maallikkokäyttäjien käsissä verrattuna heidän raskaustilanteeseensa (testattu 911 naisella).
- Tutkimuksessa, jossa testattiin 300 näytettä, laite oli > 99 % tarkka kuukautisten oletetusta alkamispäivästä alkaen.
- Kliinisen spesifisyyden testaus pre-, peri- ja postmenopausaalisilla näytteillä (1051 näytettä) vahvisti ≥ 99 %:n spesifisyyden.

Analyyttinen suorituskyky:

Analyyttinen spesifisyys osoitettiin testaamalla laite mahdollisesti häiritsevillä tai ristireagoivilla aineilla. Tulokset vahvistivat, että niiden korkeat pitoisuudet eivät vaikuta laitteen suorituskykyyn. Siihen eivät vaikuta myöskään korkeat beetaytimen hCG-fragmentin tasot, erittäin korkeat ehjän hCG:n pitoisuudet, erilaiset ominaispainot tai virtsan pH. Tarkkuustutkimus osoitti, että laitteen analyyttinen herkkyys on 10 mIU/ml.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneve, Sveitsi.

IVD	In vitro -diagnostinen lääkinnällinen laite	LOT	Eräkoodi
	Valmistaja		Viimeinen käyttöpäivä
	Ei saa käyttää uudelleen		Lämpötilarajat 2–30 °C
EC REP	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä		

Kirjallisuus

1. Perrier d'Hauterive S, *et al.* Gynecol Obstet Invest 2007; 64(3): 156–60.
2. Gnoth C and Johnson S. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74(7):661-669.

*Raskaana-tuloksista 79 % voidaan havaita 6 päivää ennen kuukautisten väliinjäämistä (5 päivää ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää).

Clearblue on SPD:n tavaramerkki.
© 2025 SPD. Kaikki oikeudet pidätetään.

2300762.00 12-2025

CE 0123